



Stetoscopi Welch Allyn

Lo strumento dei leader delle cure diagnostiche



ELETTRONICO



CARDIOLOGIA



DIAGNOSTICA GENERALE



MONOUSO

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]



Perché Welch Allyn?

Da quasi 100 anni stiamo dedicando tutte le nostre energie per poter offrire, per ciascun dispositivo Welch Allyn, prestazioni eccezionali, qualità e valore. La nostra linea completa di stetoscopi non è un'eccezione. Tre elementi chiave differenziano gli stetoscopi Welch Allyn da quelli della concorrenza: migliori prestazioni, maggior qualità e più valore.

- > **Prestazioni:** gli stetoscopi per cardiologia Welch Allyn Harvey™ ed Elite® sono stati progettati dal Dr. Proctor Harvey, il primo e unico "maestro" di cardiologia riconosciuto dall'American College of Cardiology. Il Dr. Harvey ha progettato questi stetoscopi per amplificare i più importanti suoni di eiezione ad alta frequenza, i clic sistolici ed i soffi.
Gli stetoscopi Harvey ed Elite sono inoltre conformi alle linee guida dell'American Heart Association (AHA) che indicano che uno stetoscopio dovrebbe essere dotato di un diaframma (per i suoni ad alta frequenza) e di una campana (per i suoni a bassa frequenza).
- > **Qualità:** gli stetoscopi per cardiologia Welch Allyn sono resistenti e protetti da garanzie che superano in genere di due o più anni le garanzie dei modelli della concorrenza.
- > **Valore:** gli stetoscopi Welch Allyn Harvey ed Elite sono convertibili e sono dotati di diaframmi pediatrici e per adulti. Praticamente due stetoscopi al prezzo di uno.

Welch Allyn - Una linea completa di stetoscopi per soddisfare qualsiasi esigenza

Tipo	Nome del prodotto	Professore	Studente	Cardiologo	Medico generico	Infermiera		Auscultazione	Esame generale	Pressione del sangue
Elettronico	Stetoscopio elettronico Elite	•	•	•	•			•	•	
Cardiologia	Stetoscopio a tre testine Harvey DLX	•	•	•				•		
	Stetoscopio a due testine Harvey DLX	•	•	•	•			•		
	Stetoscopio Harvey Elite	•	•	•	•	•		•	•	
Diagnostica generale	Stetoscopio professionale				•	•			•	•
	Planoscop 40					•			•	•
	Duophon 40					•			•	•
Monouso	Stetoscopio Uniscope monouso					•		•	•	

Stetoscopio elettronico Elite® con tecnologia SensorTech™

Senti di più ciò che è necessario e meno ciò che non lo è

Lo stetoscopio con sensore elettronico Welch Allyn Elite consente una precisa rilevazione del suono, riducendo al minimo vibrazioni, risonanze e perdite di suono. Con facilità si possono rilevare soffi diastolici bassi e suoni polmonari acuti che con gli altri stetoscopi potrebbero non essere udibili.

Accessori



5079-430 Analyzer Software - Consente di registrare, riprodurre, analizzare, archiviare e condividere file da PC.



5079-401 Distributor - Possibilità di condividere l'ascolto con un massimo di cinque persone.

5079-405 Stetoscopio elettronico Elite



Pulsante di accensione/spengimento con funzione di timer per consentire una maggior durata della batteria

L'interruttore del filtro a due posizioni consente di commutare fra le modalità a campana e a diaframma

Un sensore a pressione di recessione direzionale consente una riproduzione sonora di livello superiore

Il sistema di amplificazione brevettato del suono consente una trasmissione sonora ottimale

Due anni di garanzia

Binaurali e auricolari regolabili per un comfort continuo

La tensione della molla binaurale è regolabile per un comfort ottimale

latex.free

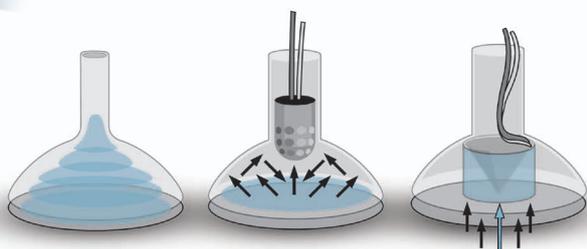
5079-405 Stetoscopio elettronico Elite

Ingresso del cavo esterno per un ascolto multiplo e per il collegamento al PC

La batteria agli ioni litio di lunga durata consente una durata fino a 140 ore

Quali sono i vantaggi della tecnologia SensorTech?

La tecnologia SensorTech ha realmente perfezionato l'arte di registrare, trasmettere e amplificare le onde sonore. Il sensore raccoglie i suoni del corpo senza inviare segnali o energia nell'organismo del paziente. Inoltre i filtri a frequenza predefinita dello stetoscopio possono aiutare a individuare i tipi di suoni che possono migliorare l'abilità diagnostica del medico.



Stetoscopio convenzionale

Stetoscopio amplificato

Stetoscopio con sensore elettronico Elite

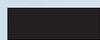
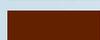
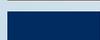
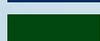
Posizionamento del trasduttore

Il sensore elettronico Welch Allyn Elite viene posizionato all'interfaccia del paziente per un rilevamento del suono più focalizzato, eliminando le vibrazioni, le risonanze e le perdite di suono non desiderate.

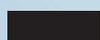
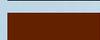
Stetoscopio Harvey™ DLX

Gli stetoscopi per cardiologia Harvey DLX sono stati sviluppati dal famoso Dr. Proctor Harvey in modo da poter trasmettere gli importanti e critici suoni ad alta frequenza del cuore, quali click, soffi e suoni di eiezione. Sono inclusi diaframmi pediatrici e per adulti con garanzia di 10 anni. Gli stetoscopi Harvey DLX sono progettati per accentuare i suoni con una precisione e chiarezza insuperabili.

Stetoscopi a testina doppia Harvey™ DLX — 71 cm (28 pollici)

	5079-325	Nero
	5079-326	Rosso scuro
	5079-327	Blu
	5079-328	Verde scuro
	5079-325P	Pediatrico, nero

Stetoscopi a tre testine Harvey™ DLX — 71 cm (28 pollici)

	5079-321	Nero
	5079-322	Rosso scuro
	5079-323	Blu
	5079-324	Verde scuro

Una molla binaurale a tripla lamina incorporata in poliuretano consente la regolazione ed evita rotture

Campana (per suoni cardiaci e soffi a media e a bassa frequenza)

Versione pediatrica disponibile

Nuova misura più lunga da 71 cm (28 pollici)

Binaurali ruotabili e auricolari intercambiabili sigillanti e confortevoli

Stetoscopi e binaurali in ottone cromato

latex free

5079-327 Stetoscopio a due testine Harvey DLX, blu



Diaframma piano—
Esclusivo diaframma a chiusura ermetica ottimizzato per frequenze più elevate, per suoni cardiaci di importanza critica come soffi, click e suoni di eiezione.



Diaframma corrugato—
Il diaframma corrugato è indicato soprattutto per rilevare suoni a bassa frequenza, murmuri cardiaci e ritmi di galoppo.



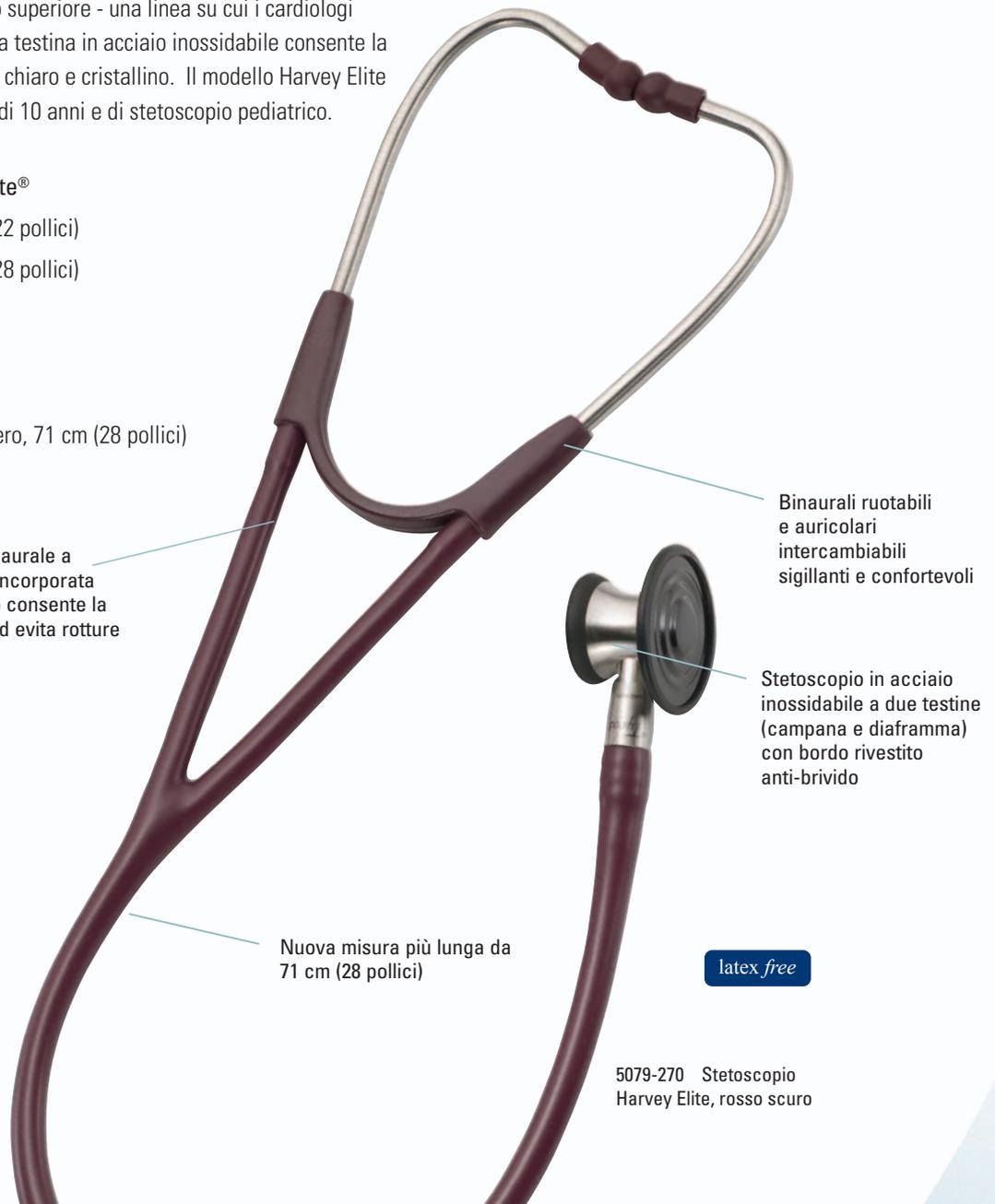
Modelli a tre testine—
Consentono di avere la massima flessibilità ed efficienza mettendo a disposizione una campana, un diaframma e un diaframma corrugato.

Stetoscopio Harvey™ Elite®

Harvey Elite offre una linea moderna con un comfort e una capacità di auscultazione di livello superiore - una linea su cui i cardiologi fanno affidamento. La sua testina in acciaio inossidabile consente la trasmissione di un suono chiaro e cristallino. Il modello Harvey Elite è dotato di una garanzia di 10 anni e di stetoscopio pediatrico.

Stetoscopi Harvey™ Elite®

- 5079-122 Nero, 56 cm (22 pollici)
- 5079-125 Nero, 71 cm (28 pollici)
- 5079-270 Rosso scuro
- 5079-271 Blu
- 5079-284 Verde scuro
- 5079-125P Pediatrico, nero, 71 cm (28 pollici)



Una molla binaurale a tripla lamina incorporata in poliuretano consente la regolazione ed evita rotture

Binaurali ruotabili e auricolari intercambiabili sigillanti e confortevoli

Stetoscopio in acciaio inossidabile a due testine (campana e diaframma) con bordo rivestito anti-brivido

Nuova misura più lunga da 71 cm (28 pollici)

latex free

5079-270 Stetoscopio Harvey Elite, rosso scuro

Qual è il vantaggio di uno stetoscopio a due tubi?

Gli stetoscopi a due tubi, come ad esempio l'Harvey DLX e l'Elite, forniscono un canale sonoro individuale per ciascun orecchio. Ciò consente di sentire le sottili caratteristiche di suoni e soffi cardiaci in modo più chiaro. Il tubo più pesante consente inoltre di filtrare l'interferenza dei tipici rumori di un ambiente affollato.

Gli stetoscopi Welch Allyn Harvey dispongono sia di campana che di diaframma per isolare facilmente i suoni ad alta frequenza (diaframma) e a bassa frequenza (campana). Alcuni stetoscopi hanno solo un diaframma. Gli stetoscopi Harvey dispongono di binaurali regolabili per poter essere personalizzati in modo perfetto e confortevole.

Stetoscopi di diagnostica generale

Chiarezza del suono e durata eccezionali

Gli stetoscopi di diagnostica generale Welch Allyn garantiscono al medico una eccellente qualità del suono e una durata e comfort eccezionali. La loro acustica consente un'accurata auscultazione di suoni cardiaci, polmonari e vascolari.

Stetoscopi professionali, per adulti e pediatrici

Eccellenti per un'auscultazione generale e per monitorare la pressione del sangue

- Struttura a doppia testina
- Disponibile nelle versioni per adulti e pediatrica
- Stetoscopio e binaurali in acciaio inossidabile
- Binaurali ruotabili e auricolari sigillanti, confortevoli e intercambiabili
- Senza lattice
- Garanzia di 5 anni

Stetoscopi professionali per adulti — 71 cm (28 pollici)

-  5079-135 Nero
-  5079-137 Blu
-  5079-289 Blu mare
-  5079-139 Rosso scuro
-  5079-285 Verde scuro

Stetoscopi professionali pediatrici — 71 cm (28 pollici)

-  5079-145 Nero
-  5079-149 Rosso scuro
-  5079-147 Blu
-  5079-287 Verde scuro



5079-135 Stetoscopio professionale per adulti, nero



latex free

Stetoscopio Planoscop

Lo stetoscopio Planoscop è caratterizzato da un diaframma ultrasottile da 40-mm, ideale per l'ascolto dei suoni di Korotkoff.

- Stetoscopio a testina singola
- Diaframma ultrasottile
- Binaurali regolabili
- Senza lattice
- Garanzia di 2 anni

Stetoscopi Planoscop per adulti — 78 cm (31 pollici)

	83-11-080 Nero
	83-11-060 Giallo
	83-11-040 Rosso
	83-11-020 Blu
	83-11-030 Verde



latex free

Stetoscopio Duophon

Lo stetoscopio ultraleggero Duophon a due testine è caratterizzato da un diaframma e da una campana da 40 mm per una qualità eccezionale del suono.

- Struttura a due testine
- Cromato
- Acustica eccezionale
- Binaurali regolabili
- Senza lattice
- Garanzia di 2 anni

Stetoscopi Duophon per adulti — 78 cm (31 pollici)

	82-11-080 Nero
	82-11-060 Giallo
	82-11-040 Rosso
	82-11-020 Blu
	82-11-030 Verde

Stetoscopi monouso



Stetoscopio Uniscope

Progettato come stetoscopio da utilizzarsi per un solo paziente in presenza di condizioni di contaminazione, lo stetoscopio Welch Allyn Uniscope consente di effettuare diagnosi accurate senza compromettere lo stetoscopio principale. Questo stetoscopio rappresenta la scelta migliore per l'auscultazione generale; è disponibile inoltre una versione pediatrica in celeste.

- Stetoscopio a testina singola
- Tubo senza lattice
- Stetoscopio e binaurali in plastica

Stetoscopi monouso

	17461 Adulto, giallo
	17462P Pediatrico, celeste

Specifiche tecniche degli stetoscopi Welch Allyn

	ELETTRONICO	CARDIOLOGIA		DIAGNOSTICA GENERALE				MONOUSO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	 STETOSCOPIO ELETTRONICO ELITE	 HARVEY DLX	 HARVEY ELITE	 PROFESSIONALE ADULTO	 PROFESSIONALE PEDIATRICO	 STETOSCOPIO DUOPHON	 STETOSCOPIO PLANOSCOPI	 STETOSCOPIO UNISCOPE
CODICE PRODOTTO	5079-405 Stetoscopio 5079-430 Analizzatore 5079-401 Distributore	A due testine 5079-325 Nero 5079-326 Rosso scuro 5079-327 Blu 5079-328 Verde scuro 5079-325P Pediatrico, Nero A tre testine 5079-321 Nero 5079-322 Rosso scuro 5079-323 Blu 5079-324 Verde scuro	5079-122 Nero (22") 5079-125 Nero 5079-270 Rosso scuro 5079-271 Blu 5079-284 Verde scuro 5079-125P Pediatrico, Nero	5079-135 Nero 5079-137 Blu 5079-289 Blu mare 5079-139 Rosso scuro 5079-285 Verde scuro	5079-145 Nero 5079-147 Blu 5079-149 Rosso scuro 5079-287 Verde scuro	83-11-080 Nero 83-11-060 Giallo 83-11-040 Rosso 83-11-020 Blu mare 83-11-030 Verde	82-11-080 Nero 82-11-060 Giallo 82-11-040 Rosso 82-11-020 Blu mare 82-11-030 Verde	17461 Adulto, Giallo 17462P Pediatrico, Celeste
TIPO PRODOTTO	Stetoscopio elettronico	A due testine/ A tre testine	A due testine	A due testine	A due testine	A testina singola	A due testine	A testina singola
DIAMETRO DELLA TESTINA	38,5 mm (1,5 pollici)	48,3 mm (1,9 pollici)	48,3 mm (1,9 pollici)	45 mm (1,75 pollici)	30 mm (1,2 pollici)	40 mm (1,6 pollici)	40 mm (1,6 pollici)	49 mm (1,9 pollici)
LUNGHEZZA COMPLESSIVA	825,5 mm (32,5 pollici)	711 mm (28 pollici)	711 mm (28 pollici)	711 mm (28 pollici)	711 mm (28 pollici)	780 mm (30,7 pollici)	780 mm (30,7 pollici)	770 mm (30,3 pollici)
LUNGHEZZA DEL TUBO	546,1 mm (21,5 pollici)	431,8 mm (17 pollici)	431,8 mm (17 pollici)	546,1 mm (21,5 pollici)	546,1 mm (21,5 pollici)	600 mm (23,6 pollici)	600 mm (23,6 pollici)	600 mm (23,6 pollici)
SENZA LATTICE (S/N)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
MATERIALE DELLO STETOSCOPIO	Plastica	Ottone	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Ottone cromato	Ottone cromato	ABS
MATERIALE DEL DIAFRAMMA	Plastica	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	PVC	PVC	Polipropilene
STILE DEL DIAFRAMMA	Piatto	Piatto/Corrugato	Piatto/Corrugato	Piatto	Piatto	Piatto	Piatto	Piatto
BINAURALE REGOLABILE (S/N)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
AURICOLARI (MORBIDI/DURI)	Morbido	Morbido/Duro	Morbido/Duro	Morbido/Duro	Morbido/Duro	Duro	Duro	Duro
AURICOLARI LAVABILI	Tamponcini con alcool o clorexidina	Alcol o acqua con detergente delicato	Alcol o acqua con detergente delicato	Alcol o acqua con detergente delicato	Alcol o acqua con detergente delicato	Alcol o acqua con detergente delicato	Alcol o acqua con detergente delicato	—
TIPO DI TUBO (LUME SINGOLO/ DOPPIO)	Lume singolo	Lume doppio	Lume doppio	Lume singolo	Lume singolo	Lume singolo	Lume singolo	Lume singolo
ANELLO ANTI-BRIVIDI	Non richiesto	No	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Non richiesto
DIAMETRO CAMPANA	—	28 mm (1,1 pollici)	36 mm (1,41 pollici)	36 mm (1,41 pollici)	26 mm (1,02 pollici)	32 mm (1,25 pollici)	—	—
VENDUTO ASSEMBLATO	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
CONFEZIONAMENTO	Scatola stampata	Scatola stampata	Scatola stampata	Scatola stampata	Scatola stampata	Scatola stampata	Scatola stampata	Sacchetto di plastica
GARANZIA	2 anni	10 anni	10 anni	5 anni	5 anni	2 anni	2 anni	—

Per ulteriori informazioni rivolgersi al distributore di zona Welch Allyn.

Sede generale Welch Allyn
4341 State Street Road
P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220
Stati Uniti
Telefono: +1 315 685 4602 o +1 800 535 6663

Assistenza clienti Welch Allyn in Europa
Navan Business Park, Dublin Road
Navan, County Meath
Irlanda
Telefono per l'Europa: +353 46 906 7790
Fax per l'Europa: +353 46 906 7754
Telefono per il Regno Unito: +44 207 365 6780
Fax per il Regno Unito: +44 207 365 9694

Welch Allyn UK Limited
Cublington Road
Aston Abbots
Buckinghamshire HP22 4ND
Inghilterra
Telefono: +44 207 365 6780
Fax: +44 207 365 9694

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

www.welchallyn.com